




- **INDICAÇÃO DE CARGA GERAL**  
Sobrecarga (o peso máximo suportado é indicado na balança). Retirar a carga imediatamente.



- **INDICAÇÃO DE PILHAS USADAS**  
As baterias estão a ficar demasiado velhas e precisam de ser substituídas.

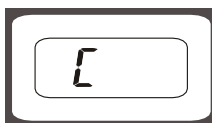

- **REPESAR**  
Este indicador é exibido quando a escala é baixada e o peso é instável e incorrectamente estimado. Repetir o processo de pesagem.

### **INFORMAÇÃO SOBRE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO**

1. A plataforma de vidro é escorregadia quando molhada. Tenha o cuidado de o manter seco!
2. Permanecer de pé na balança durante toda a pesagem.
3. EVITE qualquer choque e NÃO faça subir o peso da pessoa.
4. Cuidar do peso da pessoa, uma vez que se trata de um instrumento de precisão.
5. Limpar a balança com um pano húmido e evitar a entrada de água no interior da unidade. NÃO utilizar agentes de limpeza químicos ou abrasivos.
6. Armazenar a balança num local fresco e seco.
7. Manter sempre o pedestal numa posição horizontal.
8. Se a balança não acender, verificar se as pilhas estão correctamente instaladas e o seu estado.
9. Se houver um erro de visualização e a balança não puder ser desligada durante um longo período de tempo, retire as pilhas durante cerca de 3 segundos, e volte a colocá-las.
10. durante um longo período de tempo, retirar as pilhas durante cerca de 3 segundos, e reinseri-las. Se o problema persistir, contactar o serviço ao cliente.
11. Não utilizar a balança para fins comerciais.




## BALANÇA ELETRÓNICA

### MANUAL DE INSTRUÇÕES




ISO 9001:2008 CERTIFIED BY SGS

## ■ PILES

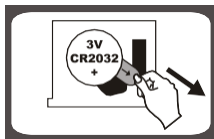


**Type 1** Bateria de lítio de 1x3V (CR2032).  
Remover a patilha de isolamento da  
bateria antes da primeira utilização.

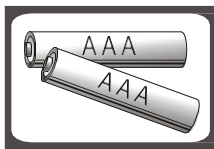

**Type 2.** 2 x 1,5v Pilhas AAA (não incluído)

+++


## ■ SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

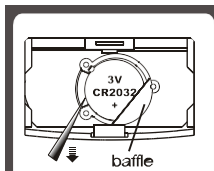

baffle


Se a caixa de bateria corresponder à mostrada na  
imagem 1, abra a caixa de bateria na parte de trás do  
auscultador, então:

- Retirar a bateria antiga com um objecto afiado,  
como mostra a figura 1
- Instalar uma nova bateria inserindo um lado da  
bateria debaixo do deflector e pressionando o outro  
lado da bateria. Certifique-se de verificar a polaridade  
antes de inserir a bateria.

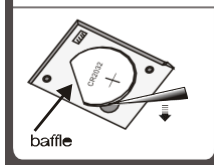

baffle

1

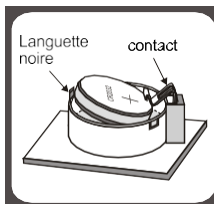

Languette  
noire

contact

Se a caixa de bateria corresponder à mostrada na  
figura 2, abrir a caixa de bateria localizada na parte  
de trás do pedestal, então:

- Puxar a aba preta para remover a bateria.
- Instalar uma nova bateria inserindo um lado da  
bateria sob o contacto e pressionando o outro lado  
da bateria. Certifique-se de verificar a polaridade  
antes de inserir a bateria.

2


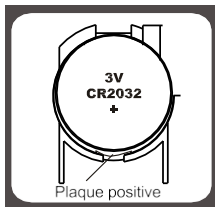


photo 3

Se a caixa de bateria corresponder à que aparece na figura  
3, abrir a caixa de bateria localizada na parte de trás do  
pedestal, então, A. Se pressionar suavemente a bateria,  
esta irá levantar-se automaticamente. B. Instalar uma nova  
bateria ligando primeiro uma parte da bateria à placa  
positiva, depois pressionando a outra parte da bateria para  
dentro. Certifique-se de localizar a placa polarizada antes  
de inserir a bateria.

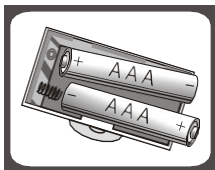

photo

Se a caixa de bateria for a mesma que aparece na foto 4,  
abra a caixa de bateria na parte de trás do pedestal,  
então,


- Remover as pilhas usadas (utilizando um objecto  
afiado, se necessário).
- Instalar as novas baterias uma de cada vez,  
inserindo um lado de uma bateria e pressionando o  
outro lado da bateria. Certifique-se de marcar a  
polarização antes de inserir a bateria.

## ■ PESEE




Para a pesagem mais precisa, colocar a balança  
sobre um chão duro e liso. Evitar tapetes e  
superfícies macias.

Nota: Se a escala fizer parte da série "Slim"  
Nota: Se a balança fizer parte da série "Slim" (ver  
embalagem), certifique-se de a colocar sobre uma  
superfície limpa e dura, como mármore, azulejo,  
etc., antes de pesar.

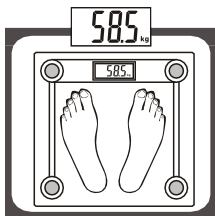

Bater suavemente no pedestal. O dispositivo  
arranca por si só. Permanecer completamente  
imóvel na balança e esperar até que o peso  
seja exibido sem flutuar.


## ■ PARAGEM AUTOMÁTICA

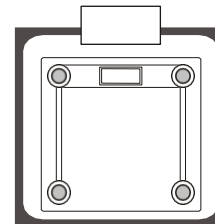

Quando se sai da escala, a unidade desliga-se  
automaticamente.  
O desligamento automático ocorre quando o peso  
indicado se manteve estável durante 8 segundos.

## ■ UNIDADE DE CONVERSÃO DE MEDIDA


Se o peso da pessoa for oferecido com unidades de medida métricas  
(quilogramas) e imperiais (libras, pedras), é possível alterá-las

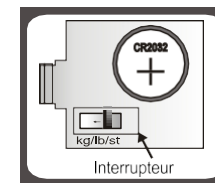

kg/lb/st

Interrupteur

Se o computador estiver na caixa da bateria,  
Abrir a caixa da bateria na parte de trás da  
balança.  
Ajustar o interruptor para a unidade de  
medida desejada: kg-lb-st

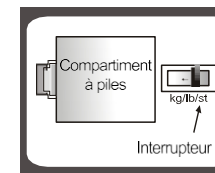


Compartment  
à piles

kg/lb/st

Interrupteur

Se a unidade de comutação da unidade de  
medida estiver no verso da escala,  
Localizar o interruptor.  
Ajustar o interruptor para a unidade de medida  
desejada: kg-lb-st

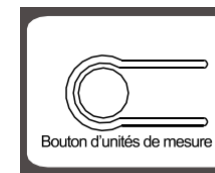

Bouton d'unités de mesure

Se a unidade de comutação da unidade de medida  
estiver no verso da escala,  
Localizar as unidades do interruptor de medição.  
Premir o botão enquanto a escala está ligada, o  
pequeno visor LCD mostrará a unidade de medida  
que está activa. Premir o botão repetidamente até  
ser exibida a unidade de medida desejada.