

Etapa 1 Fixe os apoios laterais à estrutura premindo os botões de pressão e fazendo deslizar os apoios laterais os tubos de cada lado do assento.
Certifique-se de que os botões de pressão encaixam corretamente nos orifícios e que os apoios laterais estão estáveis e ajustados da mesma forma.

Etapa 2 Fixe o encosto à estrutura premindo os botões de pressão e fazendo deslizar os tubos do encosto para os tubos de cada lado e nas costas do assento.

Etapa 3 Colocar o assento de banho sobre a banheira. Pelo menos 25 mm de cada braço antiderrapante devem assentar nos lados planos da banheira.

- Verificar se o assento não está instável ou a oscilar.

Utilização do assento de banho giratório

- (1) Levantar a alavanca e rodar o assento para que fique virado para o utilizador, depois bloquear o assento na posição baixando a alavanca e continuando a rodar o assento até que fique bloqueado.
- (2) Transferir cuidadosamente o utilizador para o assento ; ter cuidado com superfícies molhadas e escorregadias.
- (3) Desbloquear o banco, levantando a alavanca.
- (4) Levantar as pernas do utilizador sobre a borda da banheira, uma de cada vez ou as duas juntas, enquanto o assento da banheira gira lentamente.
- (5) Quando o utilizador estiver na posição de banho, bloquear o banco e certificar-se de que está bloqueado na posição e não pode rodar livremente.
- (6) Para sair da banheira, desbloquear o assento (levantando a alavanca) e rodá-lo lentamente, enquanto levanta as pernas do utilizador sobre a borda da banheira, uma de cada vez ou as duas em conjunto.
- (7) Bloquear o assento da banheira quando o utilizador estiver virado para o lado aberto da banheira. O utilizador pode levantar-se com cuidado e lentamente.

En utilisant les accoudoirs, appuyez sur le bouton et soulevez les accoudoirs vers l'arrière. Utilizando os apoios de braços, prima o botão e levante os apoios de braços para trás.

Aluguer: esta cadeira pode ser alugada desde que tenha sido devidamente limpa.

Este manual de instruções pertence a este produto e deve ser entregue a cada novo utilizador.

CADEIRÃO DE BANHO GIRATÓRIO MACIO REF · 812010



TRADUÇÃO PT MANUAL DO UTILIZADOR

INTRODUÇÃO :

Este documento é a tradução francesa do manual do utilizador fornecido pela MAXHEALTH.

Leia atentamente o manual do utilizador para uma utilização otimizada.

Este manual deve ser conservado para utilização futura após a primeira leitura.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO :


Produto	CADEIRÃO DE BANHO GIRATÓRIO MACIO
Número de série	812010
Peso máximo	136 kg
Dimensões do produto	(688-790)*554*480
Dimensões do produto dobrado	NA
Peso líquido do produto	4,82 kg
Altura da pega	NA
Dimensões do assento	400*340*42
Componente do tubo de encosto	Alumínio
Componente da estrutura	Plástico PU
Cor da estrutura	Anodo Mate
O produto pode funcionar?	SIM
A altura do produto é regulável?	NÃO
O produto pode ser dobrado?	NÃO
Apoios de braços elevatórios	NÃO
Cintos de segurança	NÃO
Assento de empurrar 2 em 1	NÃO
O produto pode ser utilizado no banho?	SIM
Embalagem	1 PC/CTN
Peso do produto bruto	5,82 kg
Dimensões da caixa	565*445*295mm
Porto	XINGANGTIANJIN, CHINA

7. INSTALAÇÃO DO PRODUTO :

Os produtos são entregues semi-montados e podem ser montados sem ferramentas.



1. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO :

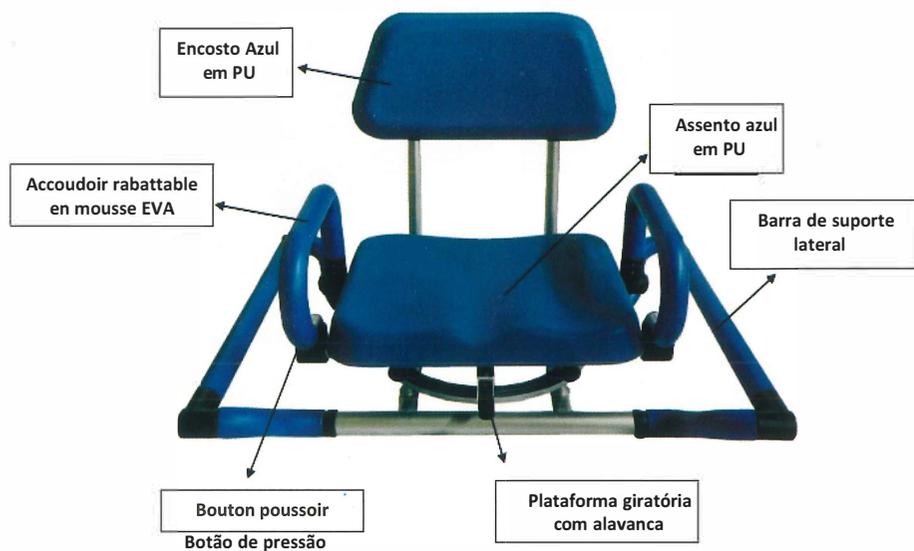

2. GARANTIA :

- 1 ano apenas para o quadro principal, excluindo os consumíveis (rodas, travões, etc.).


3. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE :

- A Maxx Corporation não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de
 - não cumprimento do manual do utilizador
 - utilização incorrecta
 - desgaste natural
 - montagem ou instalação incorrecta pelo comprador ou por terceiros
 - alterações técnicas
 - utilizar acessórios de terceiros não aprovados em vez de um acessório testado e aprovado
 - modificações não autorizadas e/ou utilização de peças sobressalentes inadequadas
- Antes de efetuar qualquer adaptação adicional a esta cadeira de rodas, deve ser obtida uma autorização escrita da Maxx Corporation. Caso contrário, não será aceite qualquer responsabilidade.

4. NORMES ET REGLEMENTATION :

- La qualité est un élément fondamental du fonctionnement de l'entreprise, qui travaille dans le respect des disciplines de la norme ISO 13485.
- Maxx Corporation s'efforce en permanence de réduire au minimum son impact sur l'environnement, tant au niveau local que mondial.

5. ETIQUETTE SUR LE PRODUIT :

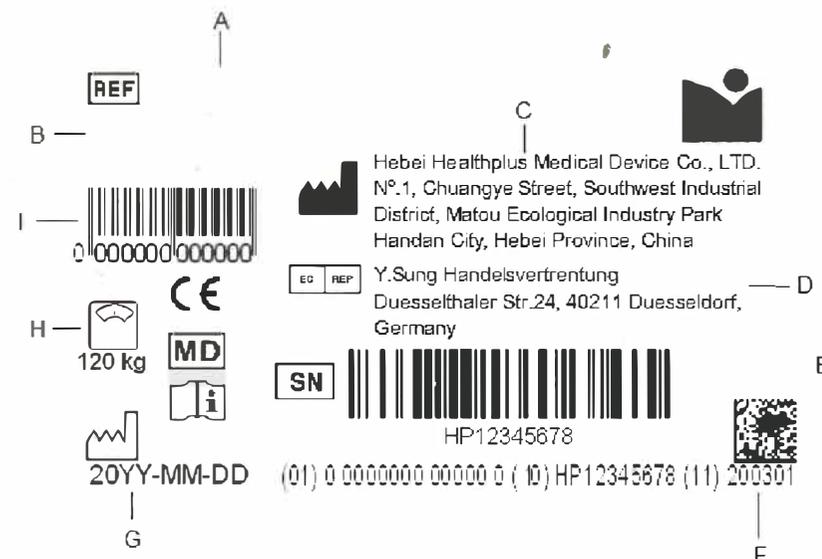

A	Referência do produto
B	Descrição do produto
C	Endereço do fabricante
D	Representante CE
E	Número de série
F	Código do DIU
G	Data de fabrico
H	Peso máximo do utilizador
I	EAN 13