

Cadeira de banho Anchor & Acessórios

Referências

Âncora Cadeira

822015

822016

Acessórios

Suporte de chuveiro móvel

822066



Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
B-1030 Brussels, Belgium
Max User Mass 70.25 kg/155 lbs



www.circlespecialty.com

Obrigado por comprar o Anchor Swim Bouncer!

Para usar e manter sua cadeira de banho com segurança, leia atentamente este manual do usuário antes de usá-la e guarde-a para referência futura. Cuidar da sua cadeira garantirá longevidade e permitirá que você aproveite ao máximo suas características.

Segurança

O uso inadequado da cadeira de banho pode resultar em ferimentos graves.

- Nunca deixe uma criança sozinha neste produto. Quando em uso, a criança deve ser presa com um cinto.
- Antes de utilizar, certifique-se de que o revestimento, o apoio de cabeça e todas as correias de posicionamento estão seguras.
- Verifique a temperatura da água antes de colocar a criança na banheira.
- Não ajuste a altura quando a criança estiver sentada na cadeira de banho.
- O ajuste da inclinação do encosto pode ser feito durante o uso. Levante a criança ligeiramente para a frente, afastando-a do suporte das costas, para fazer este ajuste.

Utilização geral

Desembale o segurança do banho e prepare-se para usá-lo.



A sua cadeira de banho Anchor vem dobrada numa única caixa e inclui um apoio de cabeça, dois cintos de posicionamento e correias para as pernas.

Retirar a precinta do apoio de cabeça da parte inferior da armação e colocá-la na parte da frente. Enrole as extremidades da precinta do apoio de cabeça por baixo da estrutura e prenda-a ao fecho de gancho e laço.

Ajustes

⚠ Coloque a cadeira de banho após qualquer ajuste.

⚠ Nunca coloque o dedo sob as abas pretas da armação para evitar apertar o dedo e ferir-se.

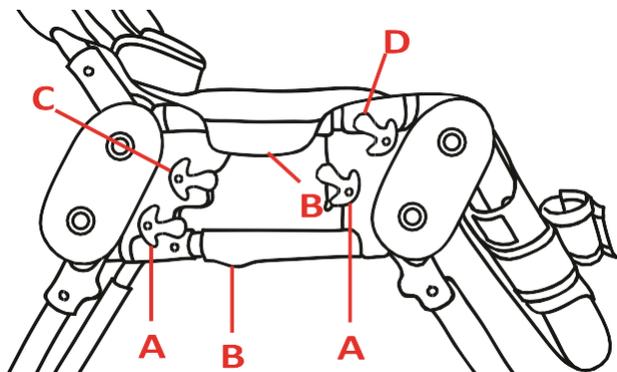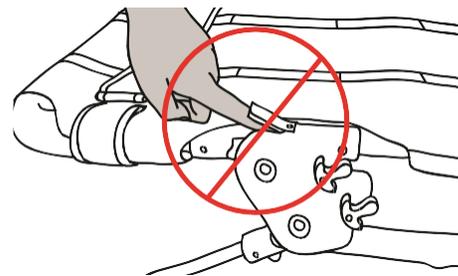

Altura do assento - Levante ou abaixe as pernas girando uma das quatro alavancas vermelhas inferiores. **(A)**.

Profundidade do assento – Retire o tecido sob o suporte da panturrilha do fecho de gancho e laço. Solte, mas não remova os quatro parafusos. **(B)** no tubo telescópico e ajustar a posição desejada puxando o quadro para fora ou para dentro. Coloque o tecido de volta sob o suporte da panturrilha.


Ângulo traseiro – Rode uma das duas alavancas

vermelhas traseiras **(C)** e oriente o encosto para a posição desejada. O encosto pode ser posicionado em quatro posições.

Ângulo do rolamento da panturrilha – Rode uma das duas alavancas vermelhas superiores dianteiras **(D)** e incline o suporte da panturrilha para a posição desejada. Pode ser ajustado para quatro posições. **Ângulo do assento** – Para obter o ângulo do assento, coloque as pernas frente mais alta do que as patas traseiras.

Encosto de cabeça – Retire a alça do encosto da cadeira e coloque-a na posição desejada. Envolve as bordas da alça do encosto de cabeça sob a armação e fixe-a ao gancho e ao fecho do laço.

Ajuste a largura do encosto de cabeça deslizando-o ao longo da largura da precinta.

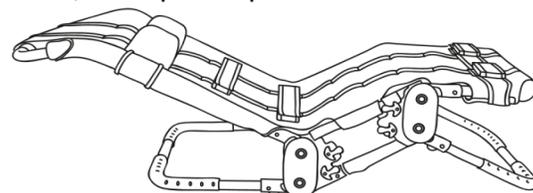

Ângulo do assento

NOTA: O suporte de cabeça pode ser usado como um suporte lateral. O suporte lateral pode ser encomendado como acessório.

Cintos de posicionamento – Insira o cinto de posicionamento no laço apropriado nas duas tiras de posicionamento vertical pretas ao longo da cadeira de natação. Envolve a criança e fixe-a com o gancho e o laço.

NOTA: Os cintos de posicionamento XL mais longos podem ser encomendados como acessório.

Cinto de apoio para as pernas – Insira o cinto de apoio das pernas no laço apropriado das duas tiras de posicionamento verticais pretas ao longo da cadeira de natação e fixe-o em torno do quadro. Coloque os posicionadores do tornozelo no local desejado no cinto de apoio da perna.

CUIDADOS e MANUTENÇÃO

- Lave a cadeira de banho Anchor com frequência.
- A Capa e as correias de suporte são facilmente removidas e podem ser lavadas na máquina em água morna com detergente suave.
- Engate todos os ganchos e laços antes de lavar.
- Use água e sabão neutro para lavar a armação e seque-a com um pano. Se utilizar água clorada, lave-a após cada utilização.
- Após a limpeza, certifique-se de que a cadeira de banho está seca antes da próxima utilização.

Inspeção a cadeira de banho Anchor antes de usá-la.

- As alavancas de ajuste devem estar firmemente fixadas e no lugar.
- Verifique se há sinais de desgaste nas tiras de gancho e laço.
- Os parafusos (B) localizados sob a cadeira de banho devem ser verificados periodicamente para garantir a estabilidade.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

Esta garantia aplica-se apenas ao benefício do comprador original do consumidor e entra em vigor a partir da data da compra.

garante que a cadeira de banho Anchor estará livre de defeitos por um período de três (2) anos. A garantia não se estende a componentes não duráveis que estão sujeitos ao desgaste normal e requerem substituição periódica.

Esta garantia não cobre falhas do aparelho devido a mau uso ou negligência do proprietário. Aplica-se apenas quando o produto é utilizado de acordo com as condições e finalidades especificadas. Se, durante o período de garantia, algum desses produtos for considerado defeituoso, será reparado ou substituído a critério da Circle Specialty.

Se você tiver alguma dúvida sobre sua cadeira de banho Circle Specialty ou esta garantia, entre em contato com um revendedor autorizado.


OBSERVAÇÃO:

Infelizmente, não podemos aceitar devoluções de banho e produtos de higiene pessoal por razões de higiene pública.

Manual do utilizador Anchor

Acessórios de Cadeira de banho

Base de duche de
rodas:
AN2100

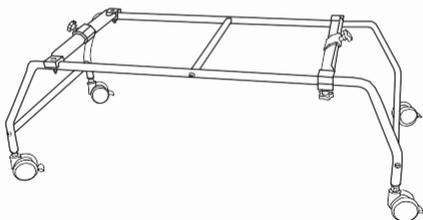

Suporte Lateral:
AN2110



Alças de posicionamento,
XL:
AN2111



Obrigado por adquirir o

Acessórios para cadeira de banho âncora


Por favor, leia atentamente estas instruções antes de montar ou utilizar os Acessórios para Cadeira de Banho Âncora.

Guarde estas instruções para referência futura.



OBSERVAÇÃO:

Todos os ajustes são livres de ferramentas para sua conveniência

MONTAGEM

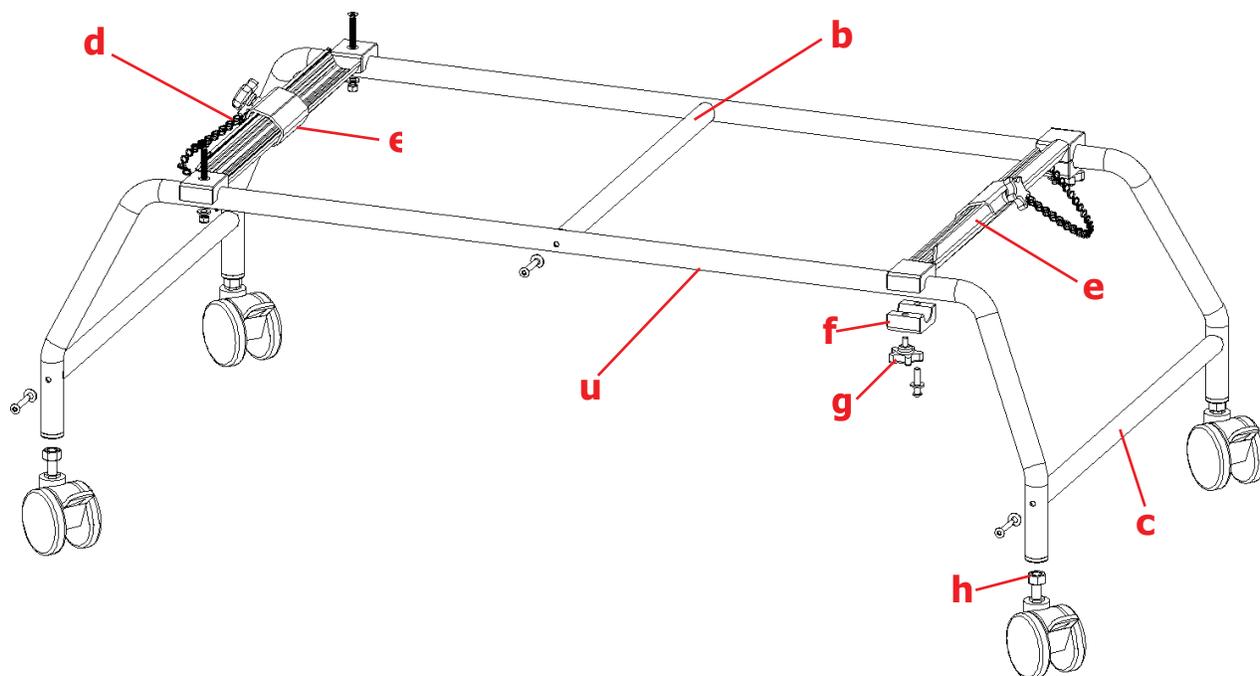


1. Antes de montar, certifique-se de que as armações laterais longas (a) serão montadas com curvas voltadas para a mesma direção.
2. Conecte a barra transversal de topo curto (b) com parafusos allen longos e anilhas curvas.
3. Conecte barras transversais laterais longas (c) com parafusos allen longos e anilhas curvas.
4. Suportes de montagem – os suportes de montagem fixos e ajustáveis devem ser colocados com o lado superior virado para o exterior do quadro e inclinado um para o outro.
5. Coloque o suporte de montagem fixo (d) no quadro longo (a) com orifício contra-afundado alinhado no quadro. Insira parafusos planos e coloque anilhas curvas e porca de tampa sob o quadro
6. Coloque o suporte de montagem ajustável (e) sobre o quadro longo. Grampos de montagem seguros (f) sob a estrutura. Insira parafusos curtos allen e anilhas planas para o interior do quadro e botão (g) para o exterior.
7. Colocar porcas de bloqueio (h) sobre a haste da roda e Insira rodízios no soquete do tubo da perna. Aperte a porca

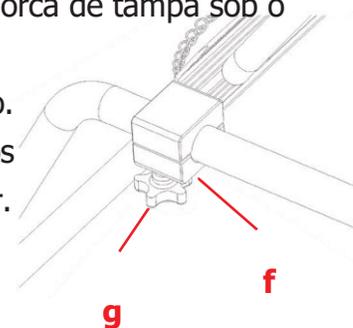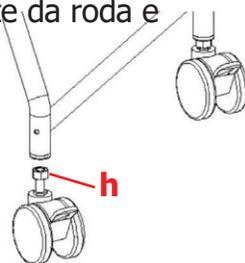

AJUSTANDO O QUADRO

A base de duche de rolamento Anchor converte facilmente a sua cadeira de banho Anchor em uma cadeira de chuveiro. Basta posicionar o suporte de montagem ajustável para corresponder à posição e ao ângulo desejados das pernas da cadeira de banho Anchor.

1. Solte os botões (g) e deslize a montagem ajustável colchete para a posição desejada.
2. Coloque a frente da cadeira de banho Anchor em O suporte de montagem fixo no quadro.
3. Coloque a parte traseira da cadeira de banho Anchor no suporte de montagem ajustável na estrutura. Uma vez na posição, aperte os parafusos (g).
4. Coloque o grampo de fixação (i) sobre a perna de cada lado e aperte os botões

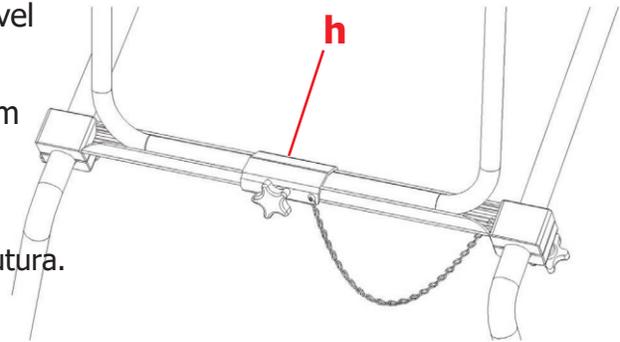

SUPORTE LATERAL DA CADEIRA

Coloque o Suporte Lateral na posição desejada, deslize através dos laços nas duas tiras verticais pretas na Cadeira de Banho Anchor, envolva o quadro e fixe com gancho e laço.

CINTOS DE POSICIONAMENTO ANCHOR XL

Insira o cinto de posicionamento através do laço apropriado nas duas tiras verticais pretas ao longo da cadeira de banho. Envolver a criança e segure com gancho e laço.

Garantia limitada a 2 anos

Esta garantia é exclusivamente para o benefício do consumidor original comprador e está em vigor a partir da data da compra.

A Circle Specialty Inc. garante que os acessórios da cadeira de banho Anchor não terão quaisquer defeitos durante um período de dois (2) anos.

A garantia não se estende a componentes não duráveis, tais como como, acessórios de borracha e punhos.

Esta garantia não cobre falha do dispositivo devido a uso indevido ou negligência do proprietário. Aplica-se apenas quando o produto é utilizado de acordo com as condições especificadas e para os fins previstos.

Se, dentro do período de garantia, algum desses produtos for comprovadamente defeituoso, tal produto será reparado ou substituído a critério da Circle Specialty.

Se tiver alguma questão sobre a sua cadeira de rodas Circle Specialty ou nesta garantia, entre em contato com um revendedor autorizado.

OBSERVAÇÃO:

Lamentavelmente, não podemos aceitar devoluções de produtos de banho e de higiene devido a questões de higiene pública.